



SPARO

Skládací pečovatelské lůžko




SPARO

Skládací lůžko vhodné zejména pro domácí péči.

Největší předností tohoto lůžka je jeho skládací konstrukce.

Skládací konstrukce umožňuje snadné a rychlé složení lůžka na menší rozměry. To usnadňuje manipulaci s lůžkem během stěhování, snadno se vejde do menších prostorů, například do dodávky, výtahu nebo při přenášení po schodech.

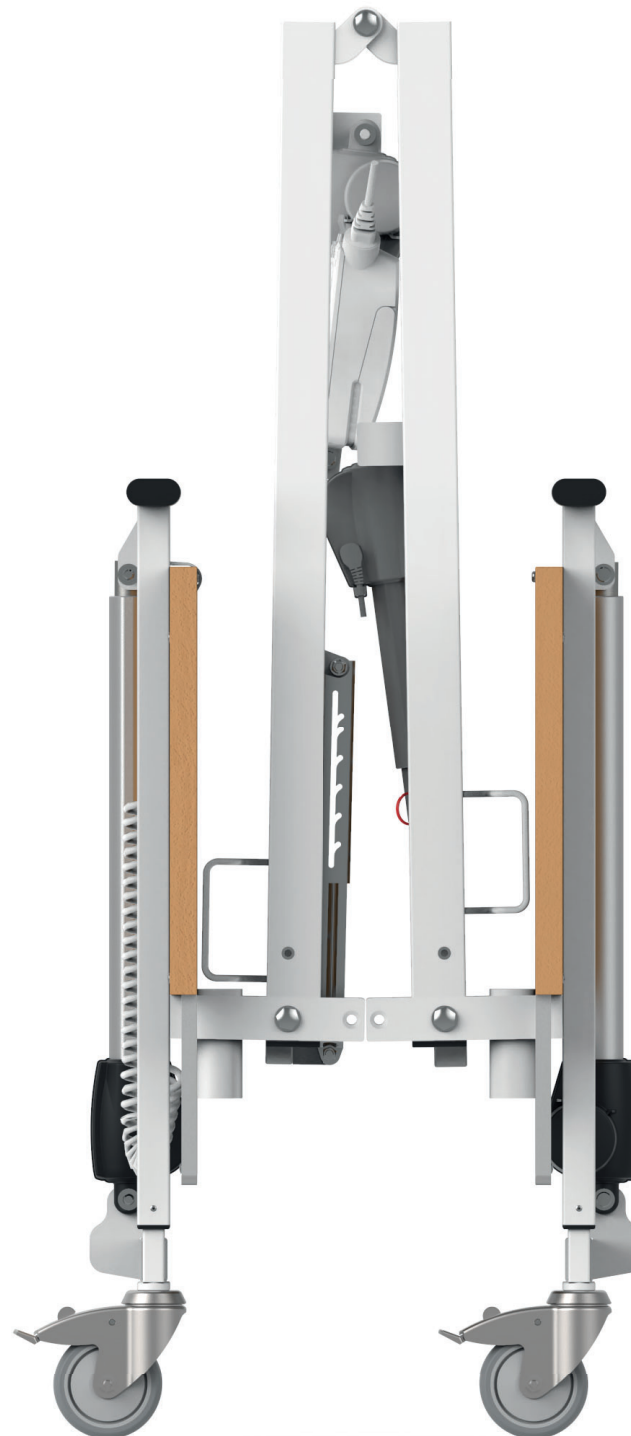



Skládací konstrukce

Největší předností tohoto lůžka je jeho skládací konstrukce. Skládací konstrukce umožňuje snadné a rychlé složení lůžka na menší rozměry. To usnadňuje manipulaci s lůžkem během stěhování, snadno se vejde do menších prostorů, například do dodávky, výtahu nebo při přenášení po schodech.





Pacientský ovladač

Lůžko je vybaveno ergonomickým pacientským ovladačem, který má klient stále při ruce a umožňuje snadné ovládání všech základních funkcí díky barevnému rozlišení funkcí.

Bezpečné provozní zatížení

Pevná a stabilní konstrukce s nosností 200 kg tvoří bezpečnou oporu i při péči o klienty s vyšší tělesnou hmotností. Díky použitým materiálům a technologiím je zajištěna extrémně vysoká životnost i při opakované zvýšené zátěži.

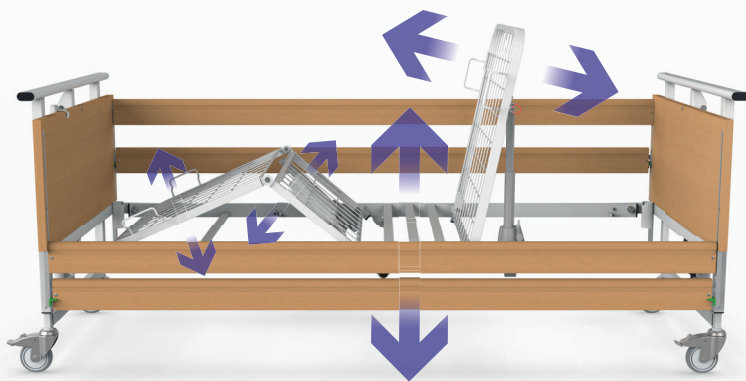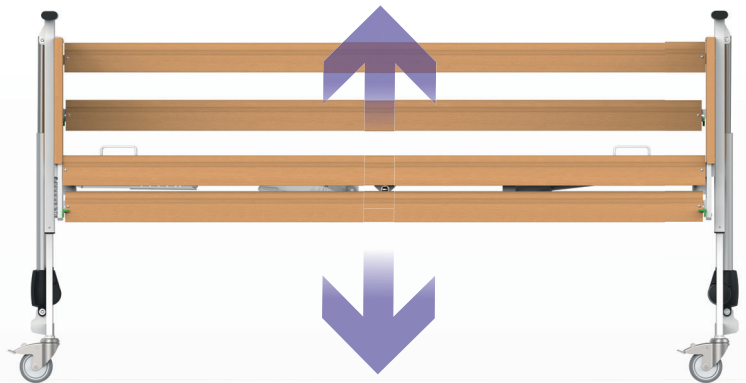


Postranice


Bezpečí klienta na lůžku zajišťují sklopné postranice. Snadné sklopení postranic pomocí dvou nezávislých pohybů výrazně snižuje riziko nechtěného spuštění. Sklopné postranice jsou uloženy dostatečně pod úroveň matrace a umožňují tak snadné vystupování z lůžka.

Komfortní polohování


Zvýšený rozsah zdvihu ložné plochy zmenšuje námahu ošetřujícímu personálu a usnadňuje manipulaci s ležícím klientem. Snížená minimální výška ložné plochy napomáhá klientovi při vstávání.

Elektrické polohování zádového a stehenního dílu v kombinaci s mechanickým polohováním lýtkového dílu umožňuje širokou škálu nastavení jednotlivých částí ložné plochy. Ošetřující personál i klient samotný si mohou pohodlně nastavit jednotlivé polohy pomocí ručního ovladače.

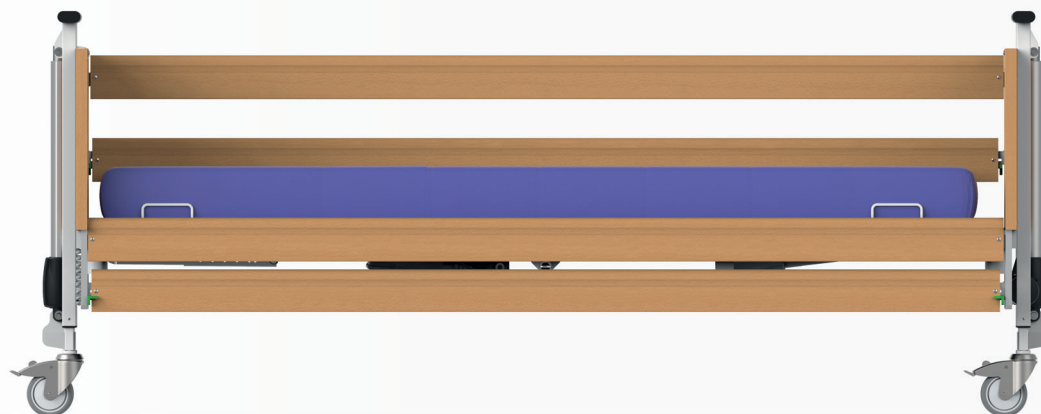


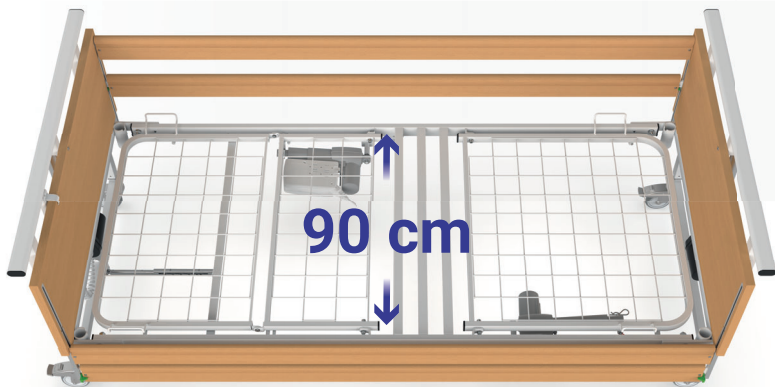

Šířka ložné plochy
Optimální šířka ložné plochy, která činí 90 cm, zajišťuje maximální komfort pro klienta.


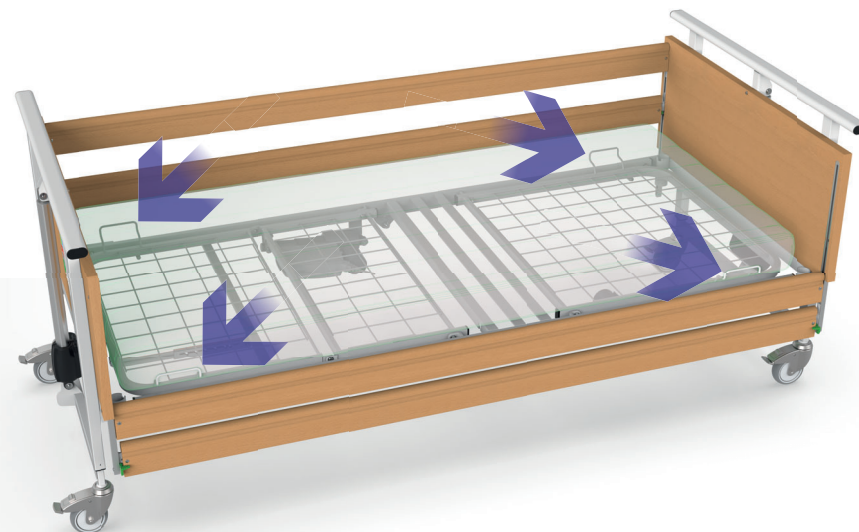


Držáky matrace
Držáky matrace zajišťují optimální polohu matrace při polohování ložné plochy. Úchyty jsou umístěny tak, aby nebránily umístění evakuační podložky.

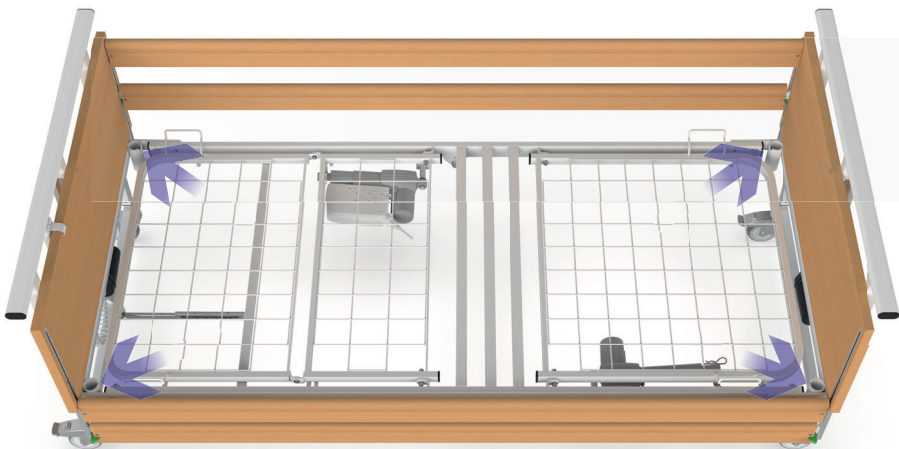

Univerzální držáky příslušenství

Univerzální držáky příslušenství jsou umístěny u hlavového, případně i nožního čela. Umožňují použití nejběžnějšího příslušenství jako jsou hrazdy, infuzní stojany, lampičky k lůžku či extenční soupravy.

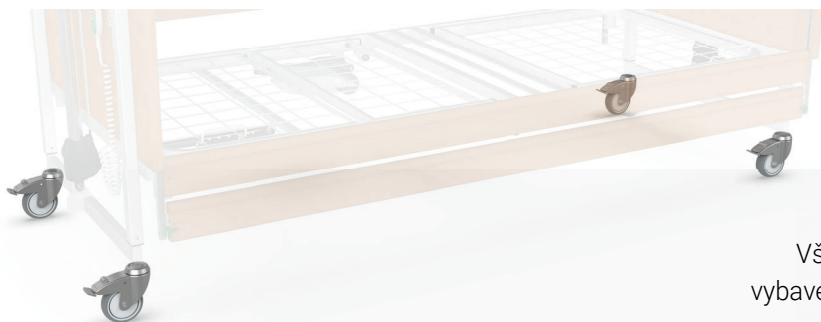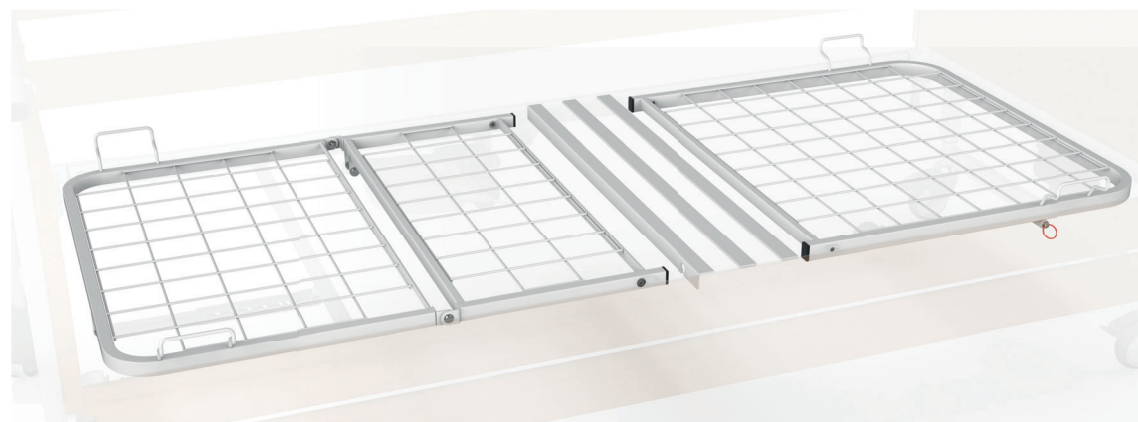

Kolečka

Všechna lůžka PROMA REHA jsou vybavena značkovými kolečky TENTE.

Ložná plocha

Ložnou plochu tvoří kvalitní drátěná konstrukce. Hlavními přednostmi těchto materiálů jsou jejich vysoká odolnost vůči chemickým přípravkům, stálost povrchu a odolnost vůči smáčení.

Trendelenburg, Antitrendelenburg



Volba designu

Možnost volby designu pečovatelských lůžek umožňuje vytvořit estetický a příjemný prostor, který může pomoci ke zlepšení nálady, komfortu a snížení stresu.



Technické parametry

Rozměry matrace (délka x šířka).....	200 x 90 cm
Vnější rozměry lůžka (délka x šířka)	219 x 104 cm
Výška ložné plochy.....	40 - 80 cm
Ložná plocha	Kovová síta
Bezpečné provozní zatížení	200 kg
Maximální hmotnost pacienta	165 kg
Lůžko je určeno pro aplikační prostředí	3, 4
Postranice	Typ UNI
Trendelenburg / Antitrendelenburg.....	12° / 12°
CPR.....	Ano
Univerzální držáky příslušenství	2x
Kolečka	100 mm, kovová

Matrace

Doporučený rozměr matrace (délka x šířka).....	200 x 90 cm
Doporučená tloušťka matrace při normálním použití	14 cm
Doporučená minimální tloušťka matrace	12 cm
Doporučená maximální tloušťka matrace	22 cm

